



AQ 2G:
Die neue Freiheit
Konkurrenzlos innovativ



AQ 2G X-Mini

Die neue Freiheit: konkurrenzlos innovativ.


Das erste und kleinste
induktiv ladbare
Akku-Außenhörer-
System der Welt






AQ 2G Ladestation

Intelligente induktive Ladetechnik

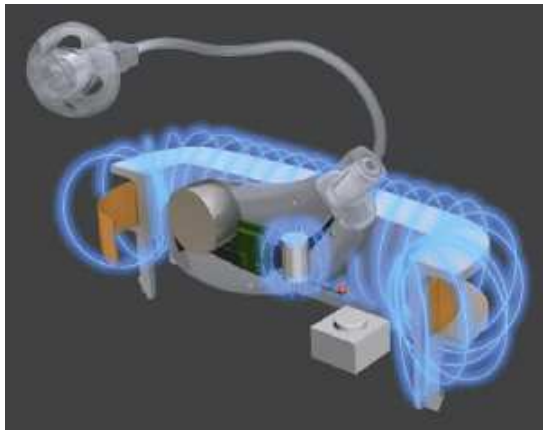

Induktiver Ladevorgang

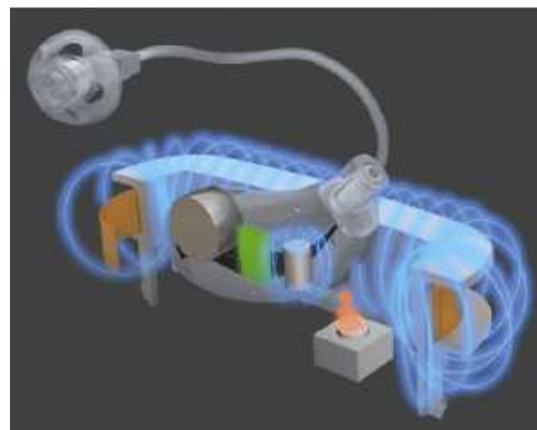

Kommunikation zwischen
Hörsystem und Ladestation
per Infrarot




Anzeige des Ladestatus im
Display der Ladestation

AQ 2G Ladestation

Intelligente induktive Ladetechnik

- Servicesymbol „Schraubenschlüssel“ ab dem 200. Ladezyklus, das den Kunden darauf hinweist, einen Service-Termin beim Hörgeräteakustiker wahrzunehmen
- Akku-Defekt würde angezeigt und der Ladevorgang unterbrochen

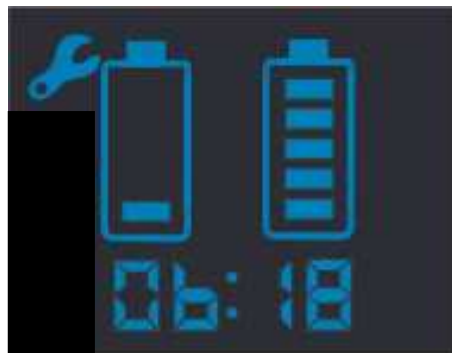

AQ 2G Ladestation – auf einen Blick

- Vollautomatische Ladetechnik
- Keine Korrosionsanfällige Kontakte
- Automatisches Ein- und Ausschalten der Hörsysteme
- Gleichzeitig Trocknung und Pflege der Hörsysteme
- Ein Überladen ist nicht möglich / Kein Memory-Effekt
- Ladestation arbeitet bei Spannungen von 110–240 V,
12 V Ladekabel verfügbar

AQ 2G Zubehör, Beratung und Service

Zubehör für den Akustiker:

- Service-Station zur Kontrolle der Hörsysteme
- Ausführen der Reset-Funktion
- Demo-Station für das komfortable AQ - System



AQ 2G Technische Highlights

Performanceklassen

First Class (16-kanalige Technik):

AQ First 2G X-Mini

Business Class (12-kanalige Technik):

AQ Business 2G X-Mini

Comfort Class (8-kanalige Technik):


AQ Comfort 2G X-Mini



AQ 2G Technische Highlights

Mikrofon-Management / Adaptive Direktionalität mit
programmierbarem Aktivierungspegel
48 / 54 und 60 dB


- Aktivierungspegel kann definiert werden,
für ein optimales Ausnutzen der Richtwirkung schon für
leise Umgebungsgeräusche

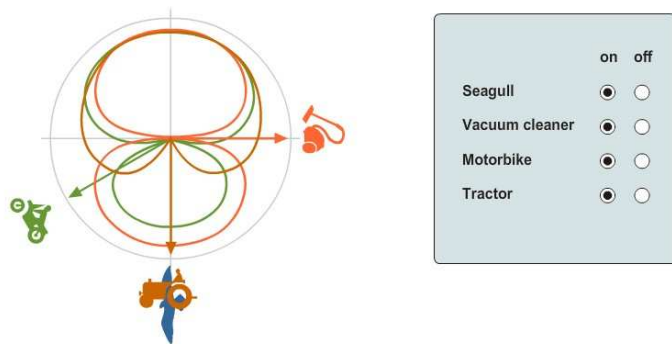

AQ 2G Technische Highlights

Situation Optimizer

- Erkennt verschiedene Umgebungssituationen (Sprache, Störlärm, Sprache im Störlärm, Musik) und führt entsprechende Regelvorgänge aus

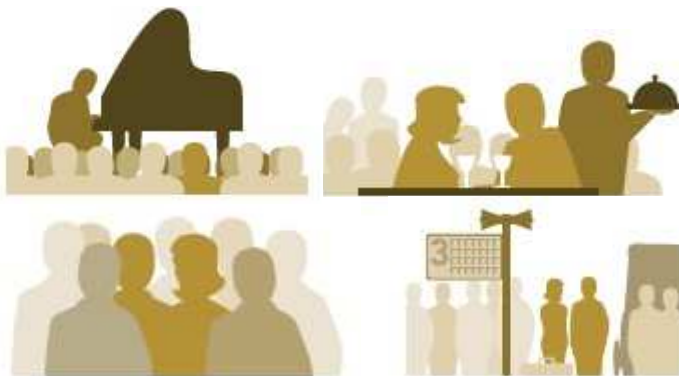

proFit

Mic-Management/Media
Situation Management

Sprache

Breitbandig Mehrkanalig

Spracherkennung

0.1 med 8kHz

Störschallreduzierung

0.1 med 8kHz

Klang

Sound Impulse Management med

HiFi Sound min

Komfort

Active Wind Block an

Active Feedback Block 2G med

Open Optimizer

Situation Optimizer

Situation Optimizer an

(Werte in dB)

Sprache	0	0	0	0
Sprache in Stör.	-3	0	+3	+3
Störlärm	0	0	0	0
Musik	0	0	0	0

' 0.1 ' 8 kHz '

Options
Details

AQ 2G Anpassung

Programmierung **ausschließlich wireless** mit ConnexxLink

- Einfach zu installieren
- Einfach einzusetzen
- Kabelloses, barrierefreies Programmieren



AQ 2G – auf einen Blick

Einfachste Handhabung

- Kein Batterienwechsel / kein Kauf und daran denken
- Automatisches An-/Ausschalten
- Einfache Visualisierung von Systemfunktionen
- Automatisches laden und Trocknen
- p2i Nano-Coating,
Schutz gegen Feuchtigkeit



AQ 2G – Umweltschutz

Und wir unterstützen die Umwelt!

- HANSATON unterstützt Plant for the Planet, eine internationale Initiative, die im Kampf gegen den Klimawandel weltweit für die Aufforstung der Wälder arbeitet



**Trees for
Climate Justice**

Pro verkauftem
AQ 2G
Hörsystem
pflanzen wir einen
Baum